

NUESTRA EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL MATERIAL DE TRÁNSITO

Anna Gimeno Fonollosa
Enfermera Coordinadora Esterilización
Hospital Quirónsalud Barcelona





Nuestro Hospital

 quirónsalud

Red de hospitales



* Complejo hospitalario que comprende dos hospitales: Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez e Instituto de Neuro-rehabilitación Quirónsalud Pontevedra.

** Complejo hospitalario que comprende dos hospitales: Hospital Riber Juan Bravo 39 y Hospital Riber Juan Bravo 49.

PERÚ	Ciudad	
Clínica Ricardo Palma	Lima	
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	Ciudad	
Ophthalmological Institute Quirónsalud Dubai	Dubai	



-  189 HABITACIONES
-  15 QUIRÓFANOS
-  5 SALAS DE PARTOS
-  148 CONSULTAS

CIRUGÍAS 2021

ORTOPÉDIA Y TRAUMATOLOGÍA: **5149**

NEUROCIRUGÍA: **2567**

CIRUGÍAS 2022

ORTOPÉDIA Y TRAUMATOLOGÍA: **4119**

NEUROCIRUGÍA: **1836**





▲ CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

INFRAESTRUCTURA



- . 2 TERMODESINFECTADORAS GRAN CAPACIDAD
- . 1 TERMODESINFECTADORA PEQUEÑA CAPACIDAD



INFRAESTRUCTURA



. 2 AUTOCLAVES VAPOR

. 2 ESTERILIZADORES DE PERHÓXIDO DE HIDRÓGENO



. 3 AUTOCLAVES VAPOR PEQUEÑA CAPACIDAD





RECURSOS HUMANOS

Lunes a Viernes

T. Mañana: 5 TCAES

T. Tarde: 5 TCAES

T. Noche: 1 TCAE

Fines de semana

Sábado (8h a 20.45h): 1 TCAE

Domingo (8h a 20.45h): 1 TCAE

T. Noche(22h a 8h): 1 TCAE



Material de tránsito

 quirónsalud

MATERIAL TRÁNSITO



- ¿QUÉ ES?
- CRITERIOS SOLICITUD
- REGISTRO EN CASIOPEA:


			INVASIVA (ABORDAJE TUBULAR) (1983)	años		
QX08						
Q	15:30	DRA. BUSQUETS	MANO O PIÉ CATASTRÓFICO	59 A.	Hospitalización	A2C / MOTOR Y ESCOPIO / ALÉRGIA: CEFALOSPORINAS - PENICILINA
	17:00	DRA. BUSQUETS	OSTEOTOMÍA MANO Y PIÉ CON OSTEOSÍNTESIS	63 años	Hospitalización	A2C / MOTOR Y ESCOPIO
QX09						
Q	15:00:00	JORDI TOMAS HERNANDEZ	ARTROPLASTIA RODILLA CON PROTESIS TOTAL (2209)	71 años	Hospitalización	EXACTECH
	17:15:00	JORDI TEIXIDOR SERRA	ARTROPLASTIA CADERA CON PROTESIS TOTAL (2207)	50 años	Hospitalización	VORTROM
	19:15:00	JORDI TEIXIDOR SERRA	ARTROPLASTIA RODILLA CON PROTESIS TOTAL (2209)	59 años	Hospitalización	MEDCOMTECH
QX10						
	16:00	LLUIS PUIG VERDIE	ARTROPLASTIA CADERA CON PROTESIS TOTAL (2207)	59 años	Hospitalización	Stryker





▲ CIRCUITO

TRAZABILIDAD INFORMÁTICA

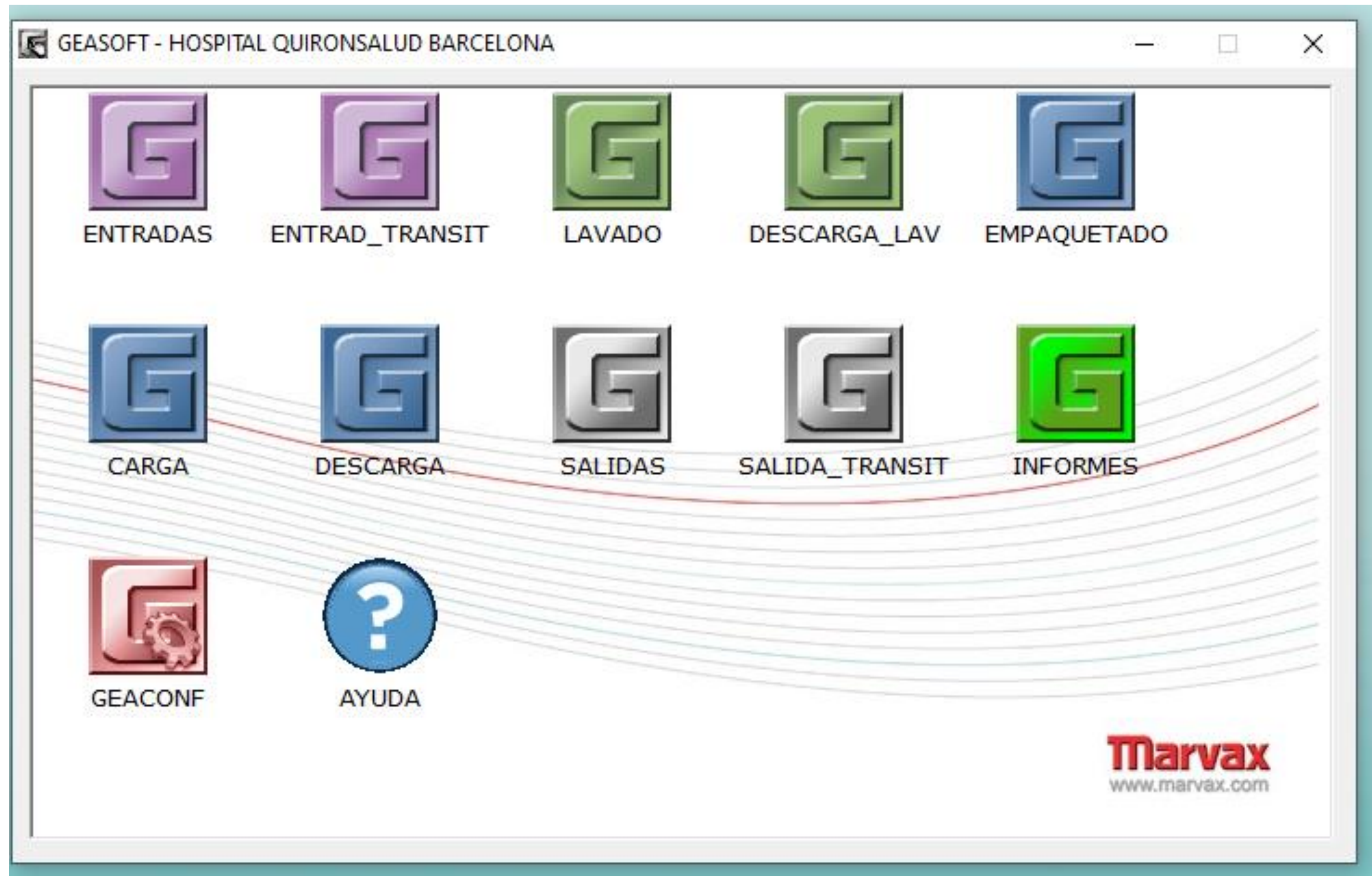

RECEPCIÓN



- REALIZADA POR UNA TCAE
- HORARIO FIJO 8.30H A 16.00H
- HA DE CUMPLIR UNOS REQUISITOS

Retractilado



Límite de peso



**PESO
MÁXIMO
10KG**



Certificado de descontaminación



Smith & Nephew, S.A.U.
Fructuós Gelibert, 2-4
08970 Sant Joan Despí
Barcelona (España)
T +34 93 373 73 01
F +34 93 373 74 53
www.smith-nephew.com

*Somos smith&nephew

H. QUIRON BARCELONA
ATT. DR. ALENTORN GELI (QUIROFANO)
PZA. ALFONSO COMIN 5-7
08023 BARCELONA

CERTIFICADO DE DESCONTAMINACIÓN
Sant Joan Despí, 06/09/2021


A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por la presente, Smith & Nephew S.A.U. certifica que todos los productos amparados en el préstamo detallado a continuación han pasado todos los controles de Calidad aplicables según tipo de producto.

Doctor:
Fecha Intervención:
Nº préstamo: 2000132572

5460290LRC	INSTR HOMBRO BASICO ELITE II
5460298LRC	INSTR COLITAS CERDO HOMBRO
5460305LRC	INSTR HEALICOIL REGENESORB
5461275LRC	INSTR SUTUREFIX RECTO + CURVO
5461303LRC	INSTR OBTURADORES CLEARTRAC

Con fecha 06/09/2021 el instrumental quirúrgico ha completado satisfactoriamente el proceso de revisión y limpieza en las instalaciones de Smith&Nephew, superando todos los ciclos de termodesinfección, y por tanto estamos en disposición de garantizar su adecuación para un uso ulterior.
Les recordamos que el instrumental quirúrgico debe ser esterilizado antes de su uso.
Atentamente,

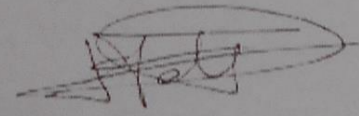
Jordi Folch
Técnico Responsable
Smith&Nephew

TRANSITO

DR. ALENTORN
ARTROSCOPIA HOMBRO
07/09/21
C:02 F:00

ENTRADA: 06/09/2021 04:35
1/1
CC SMITH

C/Arrastaria, 21, 3ª Planta - Tel.: 91 383 62 70 - Fax: 91 302 03 05 - 28022 MADRID (España)
N.I.F. A-28123297 - Registro Mercantil de Barcelona, hoja 12.962, Folio 1, Tomo 1.552, Libro 986, Sección 2ª, inscripción 1ª

JustiMplant

CERTIFICADO DE DESCONTAMINACIÓN

JRELMASCORIMP	RELIN MAS Core Imp. Tray	J10029
JRELMASCORIN1	RELIN MAS Core Ins. Tray 1	J10030
JRELMASCORIN2	RELIN MAS Core Ins. Tray 2	J10031

Modelo: MAT LD500
Máquina: 67623

Software: 1.8.1
Usuario: 3
Programa: STANDARD
Ciclo: 477
Estado: Aprobado
Fecha y hora: 16/08/2022 13:18:46
Duración: 01:04:26

Marque la casilla A si es aplicable. De lo contrario todas las partes completas de B, proporcionando la información solicitada o apropiada.

A. Este equipo/ artículo no se ha utilizado en ningún procedimiento invasivo, ni ha estado en contacto con sangre, otros fluidos corporales, gases respirados o muestras patológicas. Se ha limpiado y preparado para su inspección, mantenimiento, reparación o transporte.

B. 1. Este equipo/ artículo, ¿ha sido expuesto internamente o externamente a materiales peligrosos, como se indica a continuación?

¿Sangre, fluidos corporales, gases respirados?	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
¿Muestras patológicas?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
¿Otros riesgos biológicos?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
¿Productos químicos o sustancias peligrosas para la salud?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
¿Otros peligros?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

2. Este equipo/ artículo, ¿ha sido limpiado y descontaminado?

	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
--	--	-----------------------------

A continuación, indiquen los métodos y materiales utilizados:

Lavado manual	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Lavadora automática	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fecha y hora del proceso _____ (dd/mm/aa) a las _____ (00.00h)
Máquina de lavado y desinfección AT LD500, Maq. 67623 (Matachana) Ciclo
Si el equipo/ artículo no ha podido ser descontaminado, por favor, indique el porqué:

Dicho equipo no debe ser devuelto/ presentado sin el consentimiento previo del destinatario cuya referencia o nombre de contacto debe ser dado anteriormente.

3. Este equipo/ artículo, ¿ha sido preparado adecuadamente para garantizar un manejo seguro/ transporte?

	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
--	--	-----------------------------

Declaro que he tomado las medidas razonables para garantizar la exactitud de la información arriba detallada.

Realizado por

TRANSITO

DR. MALAGA
ARTRODESIS LUMBAR
18/10/22
C:04 F:01

ENTRADA: 17/10/2022 14:53
1/1
CC JUSTIMPLANT

JUST IMPLANT
PARQUE EMPRESARIAL, MAS BLAU II
Edificio Blau Port - Parquesol
Avda. de les Garrigues 38, planta 1ª, módulo
08820 El Prat de Llobregat
Tel: 93 325 56 50



Albarán



Justimplant

Just Implant, S.L.
Avda. de les Garrigues,38 1ªA
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona ESPAÑA
N.I.F.: B64142326
info@justimplant.cat
Tel.93 289 27 58
Fax.93 325 56 50

ALBARAN ENTREGA
Fecha 17/10/22
Núm. Albarán 2221475

HOSPITAL QUIRON BARCELONA
Plaça d'Alfonso Comin, 5-7
08023 Barcelona
Barcelona ESPAÑA
N.I.F.: A20031076
ENTREGAR EN: ESTERILIZACION Y QUIROFANO
Planta, -2

Fecha Intervención: 18/10/22
Doctor: MALAGA
Tipo Operación: ARTRODESIS LUMBAR
PAC: M.M.d.I.C Basado en Solicitud de traslado 9044.

Codigo	Descripción	Tipo Bulto	Lote	Bultos
JRELMASCORIMP	RELIN MAS Core Imp. Tray (JI0029)	CAJA METALICA	JI0029	1
JRELMASCORIN1	RELIN MAS Core Ins. Tray 1 (JI0030)	CAJA METALICA	JI0030	2
JRELMASCORIN2	RELIN MAS Core Ins. Tray 2 (JI0031)	CAJA METALICA	JI0031	1
2010028	NV I-PAS III, Diamond Tip	CONTENEDOR NEGRO	IM0802	1
TOTAL BULTOS				5



TRANSITO
DR.MALAGA
ARTRODESIS LUMBAR
18/10/22
C:04 F:01
ENTRADA: 17/10/202214:53
1/1
CC JUSTIMPLANT

Fecha Intervención: 18/10/22
Doctor: MALAGA
Tipo Operación: ARTRODESIS LUMBAR
PAC: M.M.d.I.C Basado en Solicitud de traslado 9044.


**CIRUJANO
FECHA CIRUGÍA
CIRUGÍA**




Registro de entrada

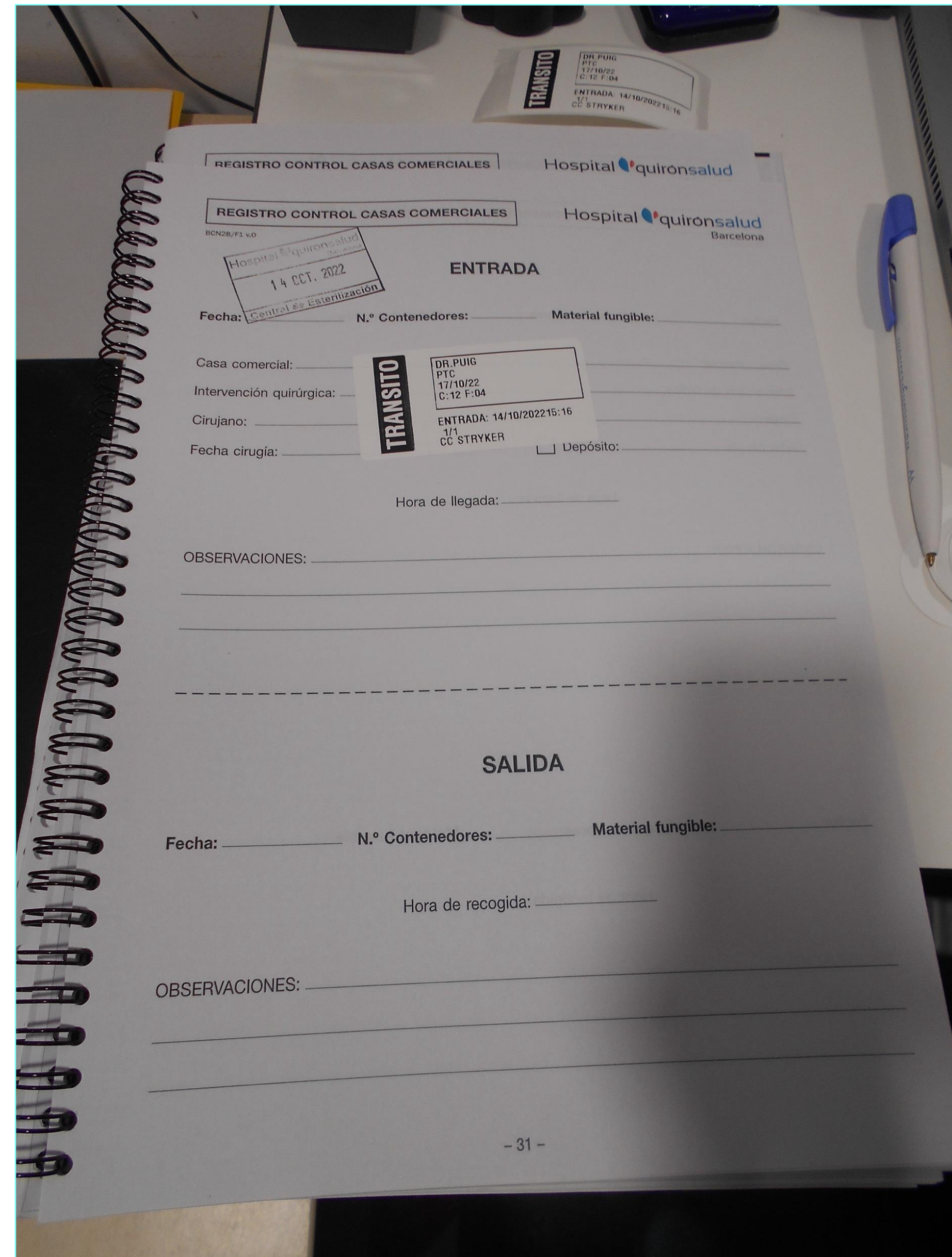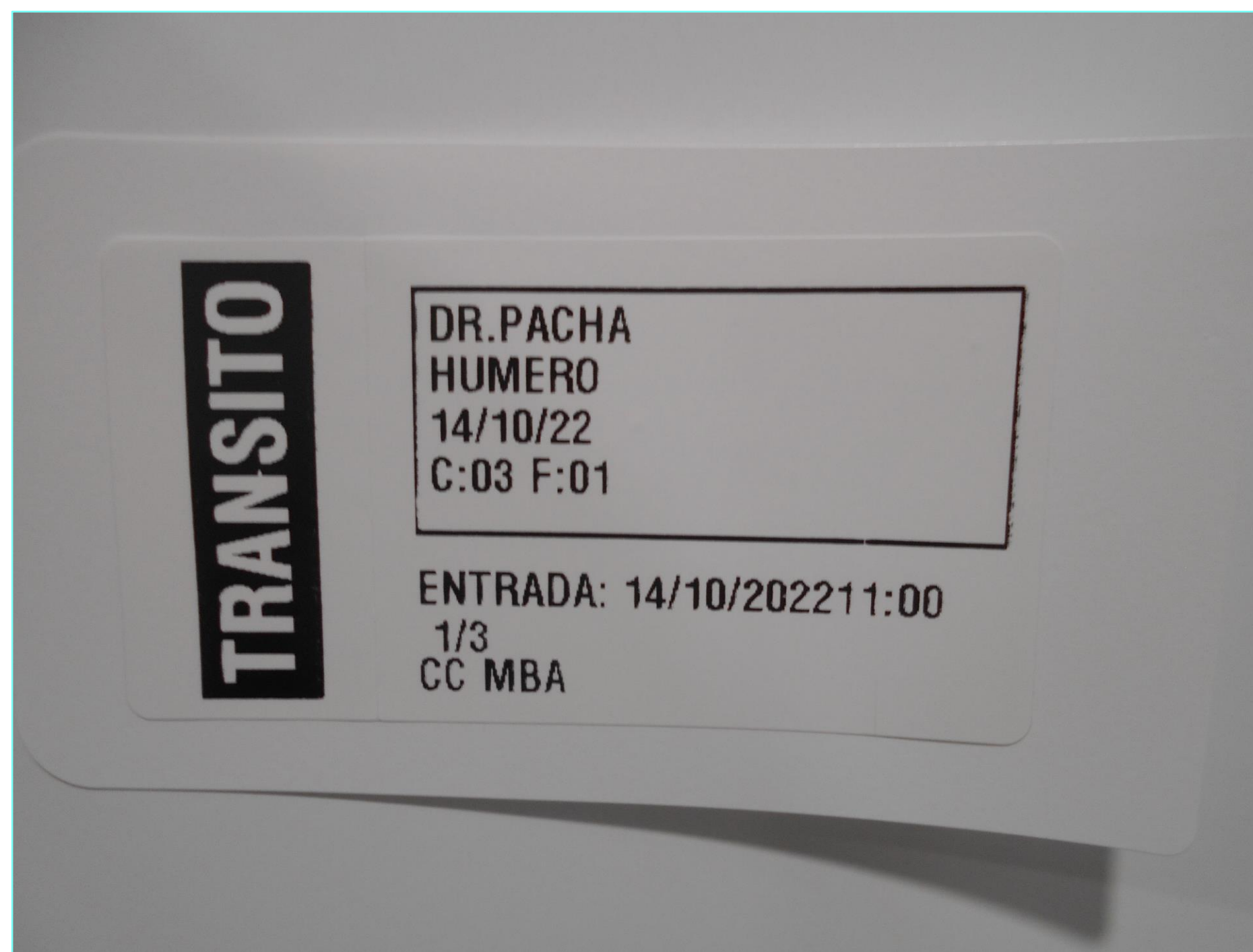

PREPARACIÓN

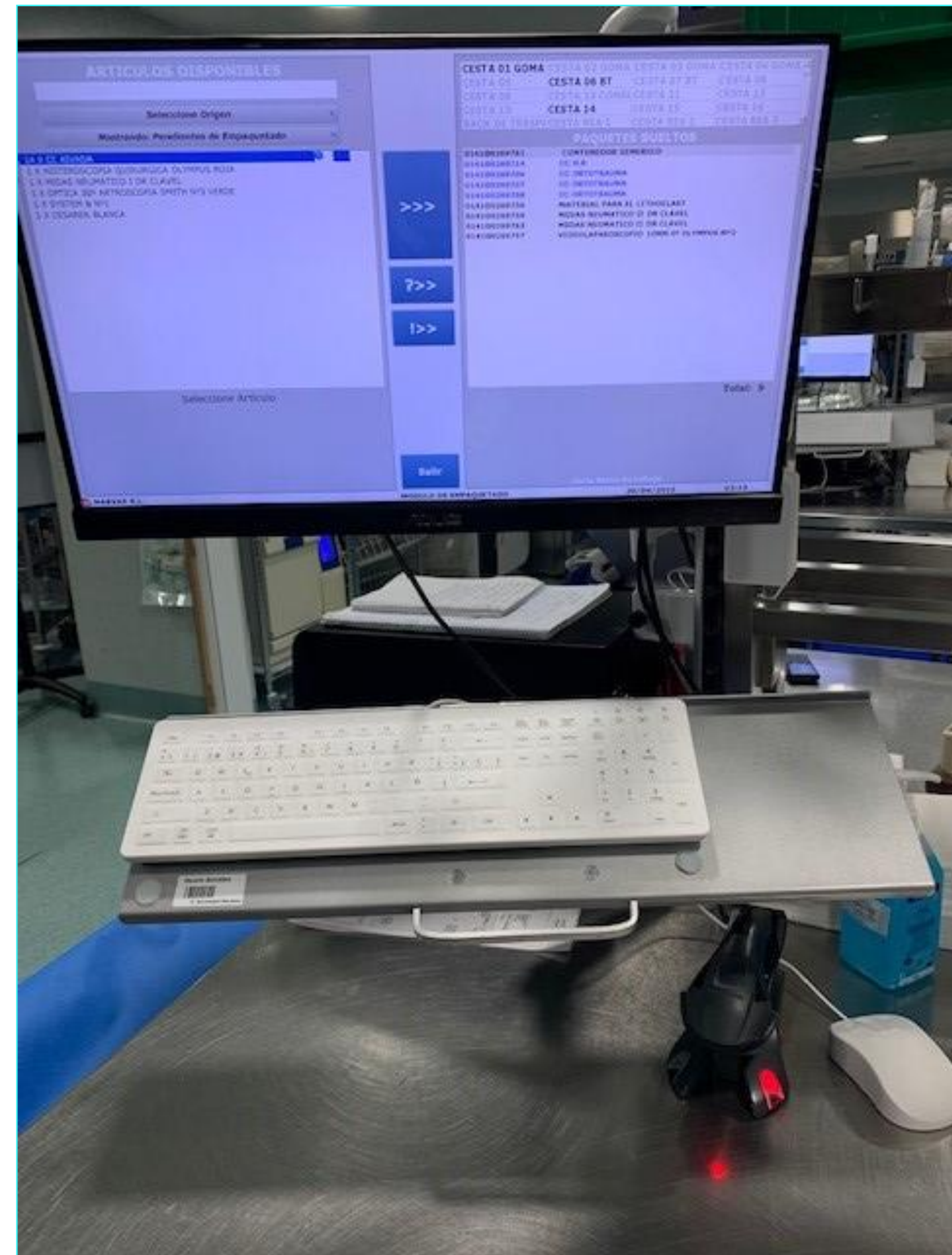

EN QUIRÓFANO

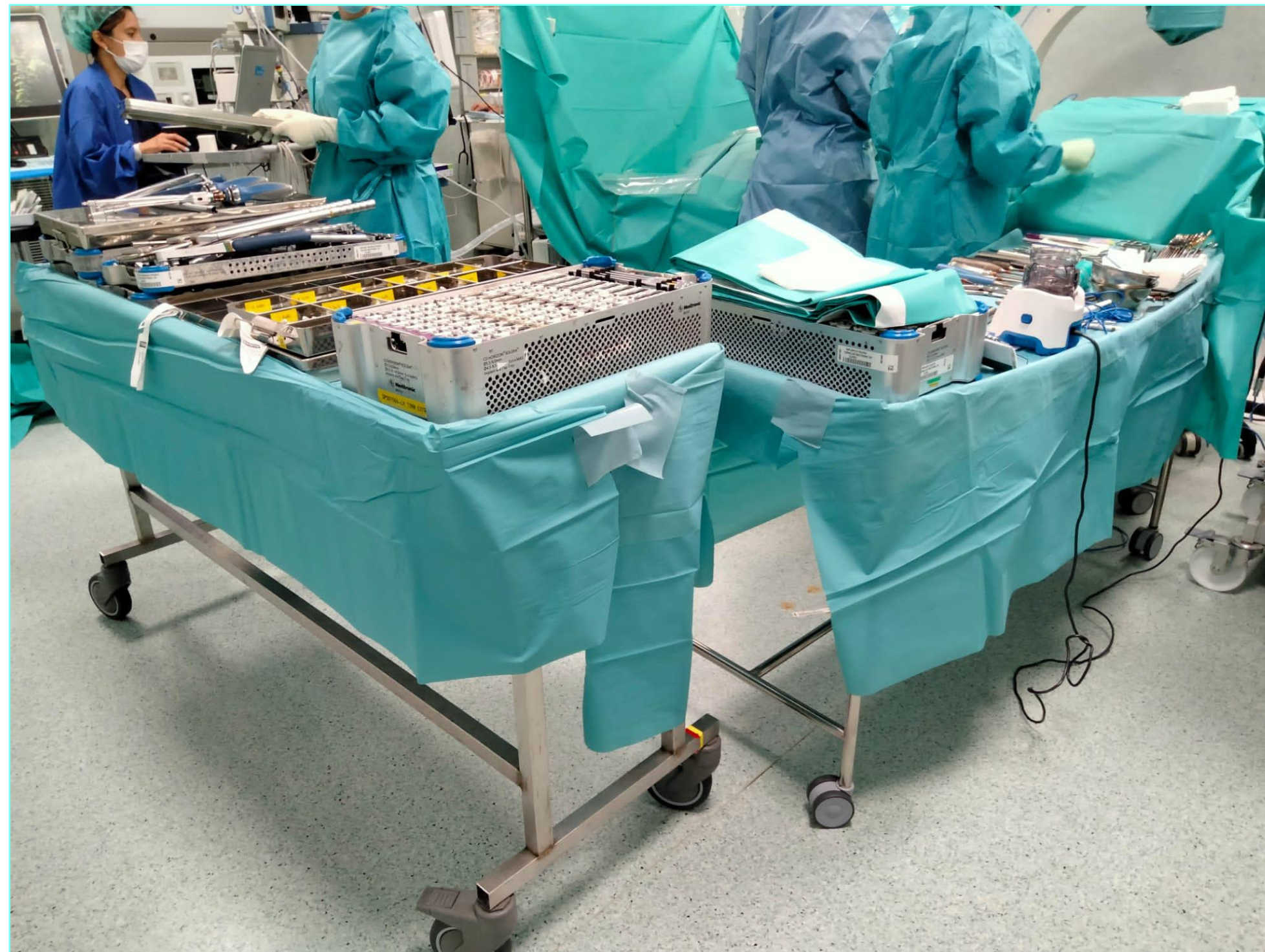

Marvax
Quirófanos

Pantalla de Lecturas

Paciente (NHC): 01119463 Nombre: MANUEL CLEMENTE HERON
Intervención: Q22HQBCN1027475 Edad: 40 Sexo: H Fecha de nac.: 13-02-1982
Quirófano: QUIQX11 Tipo Intervención: RESECCION CUERPO VERTEBRAL CON O SIN REEMPLAZAMIENTO PROTESICO (1648)

Lectura:

Identificación	Trazabilidad	Operaciones	
<input checked="" type="checkbox"/> Nombre: INSTRUMENTAL DARGON Z DR CEVILL Código: 014100348300	<input checked="" type="checkbox"/> 17/04/2023 Lote : 022519 Estado : Válido	<input type="button" value="INCIDENCIAS"/>	<input type="button" value="BORRAR LECTURA"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Nombre: CC MBA Código: 014100351673	<input checked="" type="checkbox"/> Caducidad : 18/04/2023 Lote : 022748 Estado : Válido	<input type="button" value="INCIDENCIAS"/>	<input type="button" value="BORRAR LECTURA"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Nombre: CC MBA Código: 014100351672	<input checked="" type="checkbox"/> Caducidad : 18/04/2023 Lote : 022753 Estado : Válido	<input type="button" value="INCIDENCIAS"/>	<input type="button" value="BORRAR LECTURA"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Nombre: CC MBA Código: 014100351677	<input checked="" type="checkbox"/> Caducidad : 18/04/2023 Lote : 022748 Estado : Válido	<input type="button" value="INCIDENCIAS"/>	<input type="button" value="BORRAR LECTURA"/>

Número de lecturas: 16

© Marvax S.L.





LIMPIEZA-DESINFECCIÓN



Detalle de Entrada

CC JOINTOS

Unidad Caducada

QUIQX09

CANTIDAD

- **1** +

PRIORIDAD

Normal Urgente

COMENTARIOS

DR. CUSCO
ESCAFOIDES
18/10/2022
C:01 F:01

PROCESAMIENTO DE LA UNIDAD

Requiere Lavado

Requiere Esterilizado

Aceptar Cancelar







RECOGIDA





RECOGIDA

DEVOLUCIÓN EN ZONA RECEPCIÓN CASA COMERCIAL

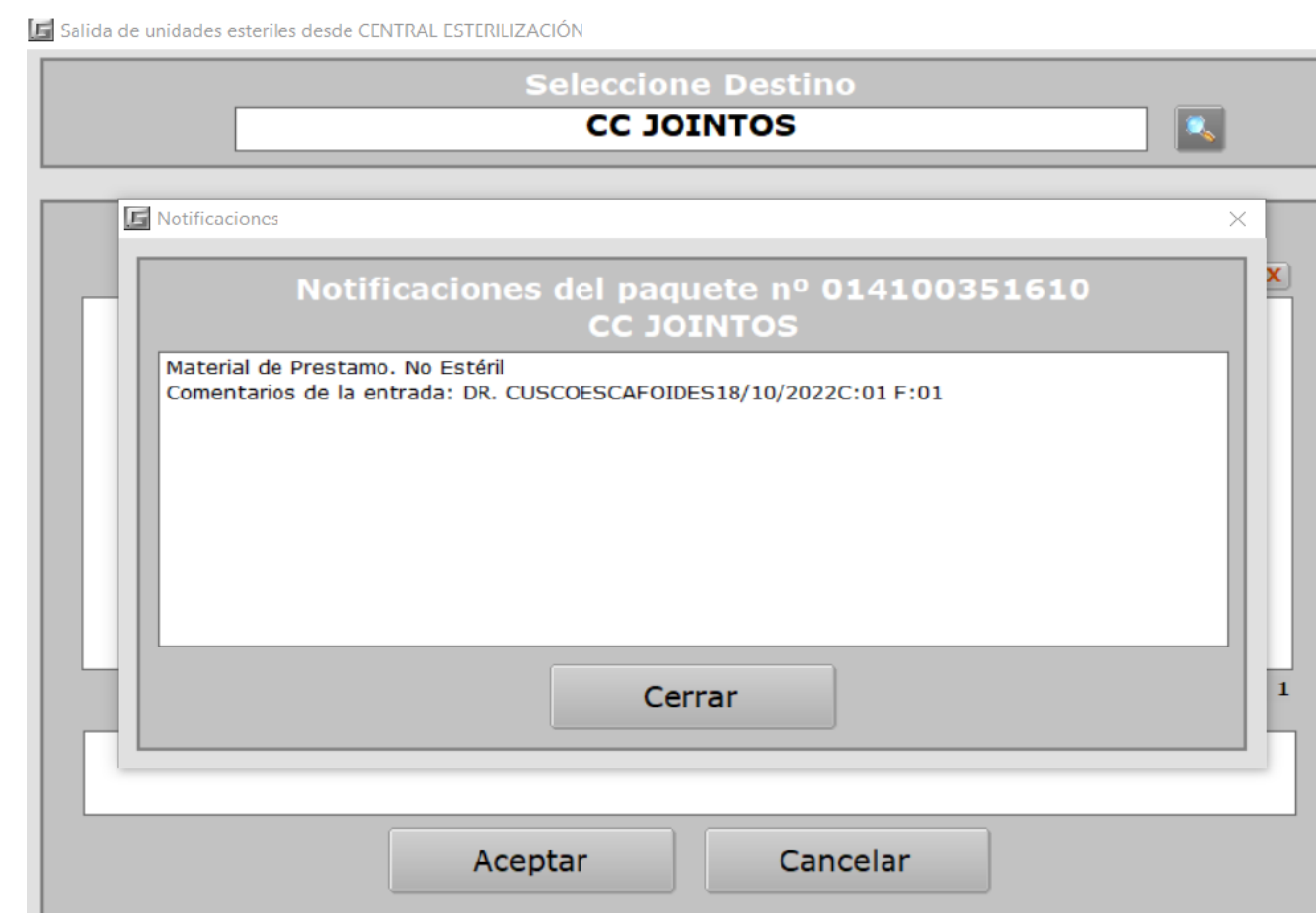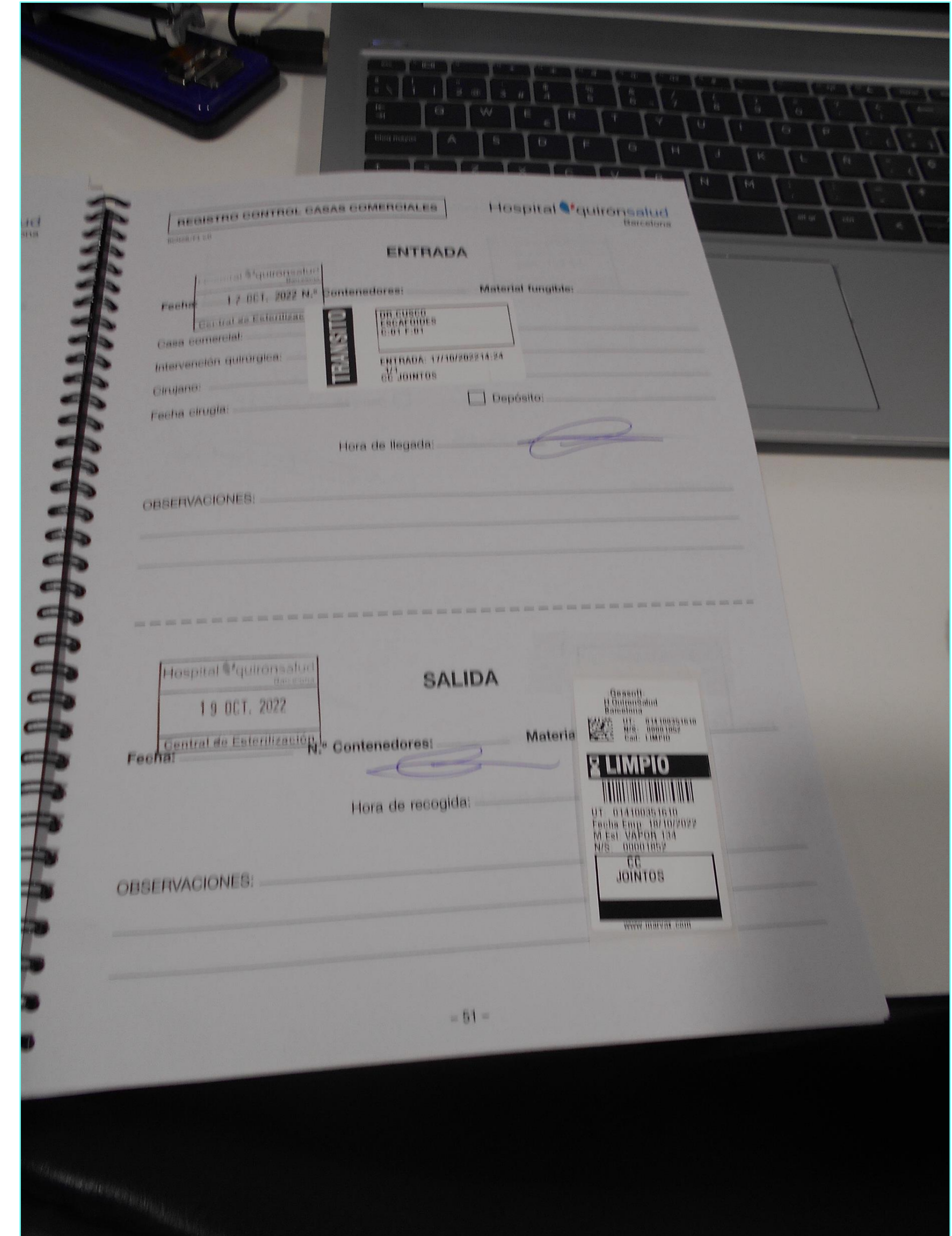



PRODUCTIVIDAD

2021

ENTRADAS
REALIZADAS

2390

CONTENEDORES
RECIBIDOS

7593

2022

ENTRADAS
REALIZADAS

1936

CONTENEDORES
RECIBIDOS

7505





CONCLUSIÓN

- ✓ Damos como válido el certificado de lavado y desinfección que nos proporciona la casa comercial siempre que esté retractilado.
- ✓ Debido a nuestra infraestructura no podemos asumir la limpieza y desinfección de todo el material de tránsito que recibimos.





GRACIAS